

Pilotgenizer 系列高压均质机

纳米乳 | 细胞破裂 | 纳米分散体 | 解聚 | 脂质体

特点

公开论文发表享有折扣

- **高效:** 大多数均质机能耗的 1/2
- **体积:** 一体化设计, 重量轻, 尺寸小
- **智能:** 编程控制系统
- **静音:** 高能效的无噪音性能
- **强力:** 20,000 psi 下超过 30 L/hr
- **CE 标准和 RoHs 标准通过**



Pilotgenizer 系列电动超高压均质机是一种触摸屏操作、程序智能控制的设备。它可用于脂肪乳剂、脂质体、纳米混悬剂、微乳剂、脂质微球、纳米乳、乳制品、大输液、细胞破碎、果汁同质化、精细化工、染料等的工业试验制备, 最大工作压力为 45000 Psi/3100 Bar。所有与介质接触的部件均采用 FDA 批准的卫生材料, 包括 316L 不锈钢、17-4PH 不锈钢、钛合金、碳化钨、聚四氟乙烯、超高分子量聚乙烯。

规格

产品号	Pilot 15k	Pilot 20k	Pilot 25k	Pilot 30k	Pilot 45k
流量	35L/hr	30L/hr	25L/hr	20L/hr	15L/hr
最小样品量	200mL	100mL	100mL	100mL	100mL
最大压力	15,000psi	20,000psi	25,000psi	30,000psi	40,000psi
尺寸 (cm)	130×60×30	130×60×30	130×60×30	130×60×30	130×60×30
重量 (kg)	120	120	120	120	120
最高温度	80°C (176°F)				
功率	380V/440V				
清洁	原位清洗、在线灭菌、冲洗清洁				
特征	压力或压力表的数字显示				




Phone: +1(323) 825-1851
Fax :+1(323) 978-4693
Email: Nano@Genizer.com
http://www.genizer.com/pilotgenizer-pilot-dual-pump_p0007.html

Discount available for public research. Genizer.com reserves the right to change specifications without notice. © 2009 by Genizer. All rights reserved. Chinese Version 091620.

Pilotgenizer 系列高压均质机



PilotGenizer-210

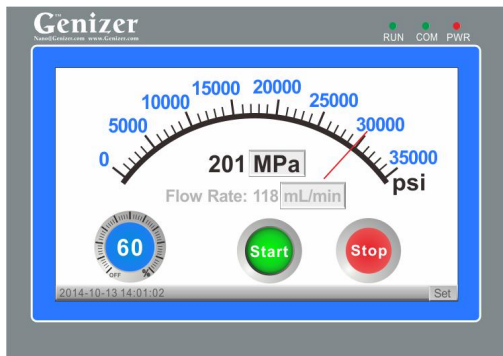

控制屏



均质腔

标准配置

零件	多通道 Y 型金刚石交互容腔可冷却型
控制系统	高压编程控制系统®: 触摸屏, 速度控制, 体积、时间、压力或温度的自动停止控制, 可设置体积控制低至 10mL, 流量和时间显示, 过载保护
压力表	电子
入口型	3/8" 高压接头、1" 或 2" 快接
出口型	3/8" 高压接头、1" 或 2" 快接
进口	在线或 500mL 316 不锈钢杯
出口	在线或 500mL 316 不锈钢杯
产品材质	316L 不锈钢、碳化钨、氟橡胶、聚四氟乙烯、超高分子量聚乙烯
材料标准	医药级, FDA 和 GMP 批准
保修期	1 年内的任何制造缺陷

可用选配

配件	高压脂质体挤出器、两级均质阀、热交换器
控制系统	机械控制: 速度、开始、停止控制
检测器	压力表、压力和温度传感器
出口型	快接或鲁尔接头
进口和出口	1000mL、2000mL 钢杯或在线: 1" 或 2" 快接
钢杯	钛高压钢杯 (耐酸碱性)